

## Deutsch

### Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie den **ACTIVE LoopRing** (ALR) erstmals verwenden. Dieses Medizinprodukt kann, bei falscher Anwendung, Verletzungen hervorrufen.

### Ursachen für Erektionsstörungen

Zu den häufigsten Ursachen von Erektionsstörungen gehören u. a.

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (z. B. Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und/oder Alkoholmissbrauch

### Produktinformation

Der **ACTIVE LoopRing** (ALR) ist ein medizinisches Hilfsmittel und wird von Männern mit erektiler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare **ACTIVE LoopRing** ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht fest genug ist.

### Was ist erektile Dysfunktion (Impotenz)?

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erektile Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen.

Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschießen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und so zur Erektion notwendige Blut bleibt nicht im Penis. Dies nennt man „venöses Leck“. Vielen davon betroffenen Männern kann mit der Anwendung des ALR geholfen werden.

Einige Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Mellitus, Herz-, Kreislaufkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Verletzungen von Nervensträngen, Alkoholismus, Drogen, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können ebenfalls erektile Dysfunktion verursachen.







### Produkteigenschaften ACTIVE LoopRing (ALR)

Der ALR wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt.

Der **ACTIVE LoopRing** ist eine feststellbare und individuell anpassbare Schlaufe aus TPE (Thermoplast), die um den Penis gestaut, vor die Hoden gelegt und fest zugezogen wird. Der Anpressdruck reduziert den Blutrückfluss aus dem Penis.

### Anwendungshinweise:

1. Zum Auseinanderziehen und Öffnen des ALR: Nehmen Sie die Schlaufe in die linke Hand. Das Ende mit der Kugel sollte oben sein (Abb. 1). Mit der rechten Hand greifen Sie in die Schlaufe und ziehen den ALR etwas auseinander (Abb. 2).
2. Führen Sie den Penis durch die gedehnte Schlaufe (Abb. 3) und schieben den ALR Richtung Körper bis vor die Hoden (Abb. 5).

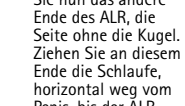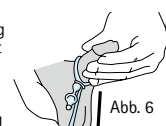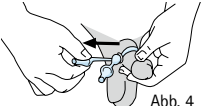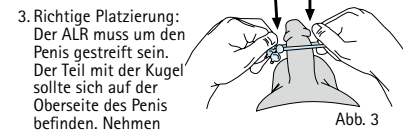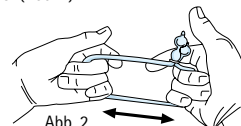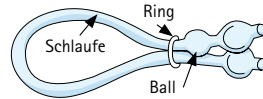

## English

### Instructions

Please read this information carefully before using the **ACTIVE LoopRing** (ALR). This device may cause injury if not used correctly.

### Indications

The **ACTIVE LoopRing** is used to treat men with erectile dysfunction or impotence. The adjustable construction ring is intended to improve erection of the penis. Erectile dysfunction could be caused by:

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- High blood lipid concentration
- Depressions or other mental disorder
- Neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- Cardiac infarction or stroke
- Side effects of pharmaceuticals (medication) for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressant and for dehydration)
- Hormonal or mental disorder
- Alcohol and drug abuse
- Smoking

### What is Erectile Dysfunction (impotence)?


Erectile dysfunction is commonly called impotence. Impotence is the inability of a man to keep an erection firm enough to perform sexually. Normal erections are the result of increasing blood flow into the penis. This blood is then stored by temporarily closing off the veins that drain the penis.

Some men cannot keep an erection because the veins of the penis stay open and prevent enough blood from being stored in the penis. This condition is called venous leak. Many of these men can be helped with the use of the **ACTIVE LoopRing**.

### Application




The **ACTIVE LoopRing** is a medical device designed to improve erections by increasing the fullness and firmness of the penis. The **ACTIVE LoopRing** consists of an adjustable loop made of silicone rubber that is placed around the base of the penis and tightened. This pressure reduces the flow of blood out of the penis.

The **ACTIVE LoopRing** may be tightened or loosened to fit. An O-ring and ball-locking unit allow easy adjustment of tension.

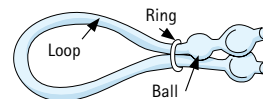


### How to use the ACTIVE LoopRing:

1. **Stretch the ALR:** Grasp the loop with the left hand. Note that the end of the tubing with the ball is on top (figure 1). With the right hand, grasp the loop next to the O ring and stretch the ALR device (figure 2).
2. **To place around the shaft of the penis:** place the end of the penis through the stretched loop and slide the **ACTIVE LoopRing** over the shaft of the penis (figure 3) until it is around the base (see figure 5)
3. **Place the ACTIVE LoopRing:** place it so that the loop goes around the base of the penis. The part of the tubing with the

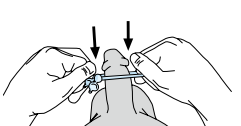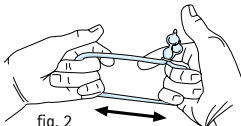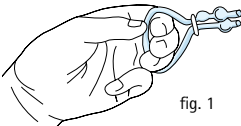

ball should be on the top side of the penis. Grasp the tab end (lower end) of the tubing without the ball. Pull horizontally away from the penis until the **ACTIVE LoopRing** is gently snug around the base of the penis (figure 4). When the ALR is first put in place, the ends of the tubing should be on either side of the shaft of the penis with the ball on top (figure 5)

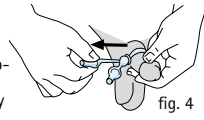

4. **To get proper tension:** Grasp the tab on the end of the tubing without the ball and pull down (figure 6). The ALR should be tight enough to keep the blood from leaving the penis. Too much tension may lead to discomfort and could cause harm to the penis. If the erection is not firm enough, apply pressure with your hand to the area behind the scrotum. This may push

more blood into the penis. As the penis becomes firm, the ALR may be tightened or loosened to get an erection while providing most comfort.

5. **To loosen the tension:** after intercourse or if the erection is too firm, the ALR may be loosened by pulling up on the end of the tubing with the ball (figure 7). Once fully loose, the ALR can be removed by sliding over the end of the penis.

### Contraindications of ACTIVE LoopRing

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advices not to have sexual activities
- If you have sickle cell anemia, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
- If you have an abnormally formed penis.

more blood into the penis. As the penis becomes firm, the ALR may be tightened or loosened to get an erection while providing most comfort.

5. **To loosen the tension:** after intercourse or if the erection is too firm, the ALR may be loosened by pulling up on the end of the tubing with the ball (figure 7). Once fully loose, the ALR can be removed by sliding over the end of the penis.

### Contraindications of ACTIVE LoopRing

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advices not to have sexual activities
- If you have sickle cell anemia, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
- If you have an abnormally formed penis.

### Warning and Hinweise:

Dieses Produkt ist aus medizinisch geprüfem TPE (Thermoplastische Elastomere) gefertigt und löst daher keine Latexallergie aus. Falls Sie keine Erektion erreichen können, die für einen Geschlechtsverkehr ausreichend ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt/Ärztin bevor Sie dieses Produkt anwenden. Ihr Arzt/Ärztin wird Sie auf die häufigsten Ursachen von erektiler Dysfunktion hin untersuchen, wie z. B. Diabetes mellitus, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronisches Nierenversagen und Alkoholismus.

### Benutzen Sie den ALR niemals länger als 30 Minuten.

Eine zu lange Anwendung des ALR kann eine dauerhafte Verletzung des Penis verursachen. Schlafen Sie nicht mit dem ALR ein. Warten Sie 60 Minuten zwischen zwei Anwendung des ALR.

Bei Problemen fragen Sie Ihren Arzt/Ärztin und wenden Sie den ALR nicht mehr an. Trotz stärkster Spannung des **ACTIVE LoopRing** ist die Erektion kaum noch zu erzielen. Nehmen Sie keinen Alkohol oder Beruhigungsmittel während der Anwendung des ALR ein. Nutzen Sie den ALR nicht zur Geburtenkontrolle. Nutzen Sie den ALR nicht, wenn Sie keine Schmerzempfindung im Penis haben. Schmerzen bei der Anwendung können ein Zeichen sein, dass der ALR Verletzungen hervorruft. Nutzen Sie den ALR nicht, falls Ihre Hände eine eingeschränkte Mobilität haben.

### Warning and precautions:

This product is made of TPE thermoplastic rubber which will not cause latex allergic reactions.

- Do not use the **ACTIVE LoopRing** for more than 30 minutes per use. Use of the **ACTIVE LoopRing** for too long may cause permanent injury to the penis. Do not fall asleep wearing the **ACTIVE LoopRing**.
- Wait 60 minutes between uses of the **ACTIVE LoopRing**
- Call your doctor if a problem occurs. Stop using the **ACTIVE LoopRing** if these problems persist.
- Do not use the **ACTIVE LoopRing** if you cannot sense pain in the penis. Pain may be a warning sign that the device is causing injury.
- Do not use the **ACTIVE LoopRing** if you do not have adequate hand function to easily remove the device.
- Do not use alcohol or sedatives when using the **ACTIVE LoopRing**.
- Do not use the **ACTIVE LoopRing** as a method of contraception.

### Mögliche Nebenwirkungen des ACTIVE LoopRing

- Schmerzen oder Rötungen des Penis
- Andauernde Erektion: falls die Versteifung mehr als 2 Stunden anhält, rufen Sie sofort Ihren Arzt an.
- Dauerhafte Verletzung des Penis falls der ALR entweder zu fest oder länger als 30 Minuten angewandt wurde.

### Pflegehinweise:

Der ALR kann immer wieder benutzt werden. Reinigen Sie den ALR mit warmem Wasser und milder Seife. Bewahren Sie ihn trocken und bei Zimmertemperatur auf.

Ersetzen Sie den ALR falls das Material brüchig wird oder nicht mehr die Spannung hat, um die Dehnung zu erlangen.

### Für weitere Informationen über den ALR rufen Sie uns bitte an:

Tel + 49 6105 20 37 20  
KESSEL personal healthcare  
www.medintim.de

Made in Germany

### Possible side effects

- Pain or redness of the penis
- Prolonged erection: if your erection is firm for more than 2 hours, call your healthcare provider immediately
- Permanent injury to the penis if the **ACTIVE LoopRing** is either worn too tight or for more than 30 minutes.

### Care of the ACTIVE LoopRing:

The ALR is re-usable. Clean the ALR after use with warm water and mild soap. Store it at a dry place.

### Form more information about the ACTIVE LoopRing, please call at Germany:

Tel + 49 6105 20 37 20  
KESSEL personal healthcare, Germany  
www.medintim.de

Made in Germany